



NEURÔSONIC

Neurosonic Cube
Omistajan opas

Neurosonic Cube

Pieni laite, tehokas palautuminen.

Neurosonic Cube saattaa ulkoisesti näyttää minimalistiselta rahilta, mutta sen sisällä on suomalaista hyvinvointiteknologiaa, jossa ei ole mitään tavanomaista.

Cube tuottaa tehokasta matalataajuisia värähtelyä alavartalolle – aktivoiden palautumista työskentelyn, levon tai latautumisen aikana.

Olitpa sitten työpöydän ääressä, palautumassa treenin jälkeen tai viettänyt päivän jaloillasi, Cube on suunniteltu virkistämään väsyneitä jalkoja, vähentämään uupumusta ja parantamaan verenkiertoa vain 16 minuutissa. Mekaaninen värähtely stimuloi autonomista hermostoa, auttaen kehoa rentoutumaan ja palautumaan luonnollisesti – ilman ponnisteluja. Cube toimii yhdellä painikkeella eikä vaadi asennusta.

Neurosonic Cube on täydellinen toimistoihin, kuntosaleille, taukotiloihin tai vaikka kotitoimiston pöydän alle.


Hyödyt:

- Parantaa jalkojen verenkiertoa
- Vähentää väsymystä ja jännitystä
- Tukee päivittäistä palautumista ja hyvinvointia

Käytön aloitus


1. Kytke virtajohto

Liitä virtajohto laitteeseen. Liitä virtajohto ohjauspaneelin alareunassa sijaitsevaan liitäntään. Varmista, että liitin menee kokonaan paikalleen ennen laitteen käynnistämistä.

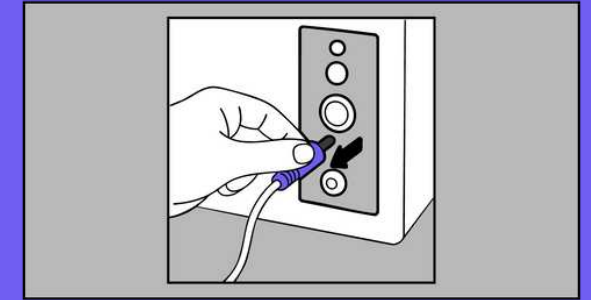

2. Kytke virta päälle

Paina alempaa painiketta (merkitty virtasymbolilla). Ohjelma käynnistyy automaattisesti.

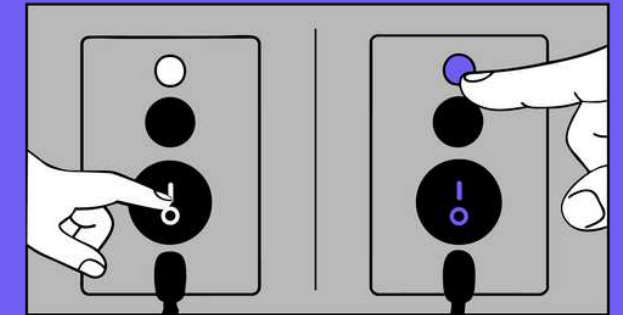

3. Aloita ohjelma


Paina ylempää painiketta käynnistääksesi 16 minuutin ohjelma, kun virta on päällä.

Voit myös käynnistää uudelleen käynnissä olevan istunnon painamalla samaa painiketta.

4. Jalkojen asettelu

Istu tuolille ja aseta jalkasi niin, että pohkeesi lepäävät kokonaan Cuben päällä.

Varmista, että ohjauspaneeli on istuessasi oikealla puolellasi. Tämä varmistaa, että värähtelyaallot suuntautuvat oikeaan suuntaan.

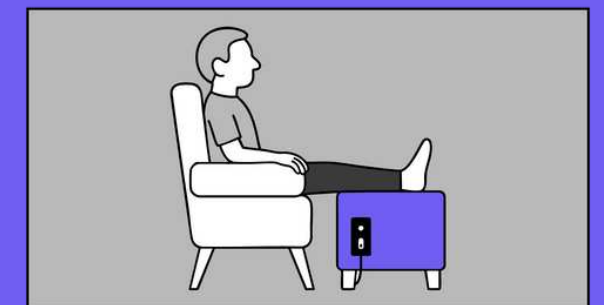

Käyttövinkkejä

Löydä mukava asento

Istu tukevalla tuolilla tai sohvalla ja aseta jalkasi kevyesti Cuben päälle.

Anna pohkeidesi levätä pehmustetulla pinnalla. Varmista, että ohjauspainikkeet ovat oikealla puolellasi istuessasi.

Rentoudu ja pysy paikallasi ohjelma aikana

Rentoudu ja pysy paikallasi ohjelman aikana. Liikkuminen voi heikentää värinän tehoa.

Hengitä syvään ja rauhallisesti

Tue palautumistasi hengittämällä hitaasti ja syvään istunnon aikana.

Tämä tehostaa kehon luontaista rentoutumisreaktiota.

Anna Cuben tehdä työnsä

Sinun ei tarvitse tehdä mitään istunnon aikana. Lepää vain ja anna värähtelyteknologian hoitaa työ puolestasi.

Käytä säännöllisesti

Ota Cube osaksi päivittäistä rutiiniasi.

16 minuuttia ohjelma voi auttaa vähentämään väsymystä, parantamaan verenkiertoa ja tukemaan palautumista – erityisesti pitkien istumajaksojen tai fyysisen rasituksen jälkeen.

Juo vettä ohjelman jälkeen

Kuten kaikissa verenkiertoa edistävissä palautumismenetelmissä, on suositeltavaa juoda lasillinen vettä ohjelman jälkeen.

Parhaat käyttöhetket

- Pitkien työpäivien jälkeen tai aikana
- Fyysisen rasituksen jälkeen
- Tauoilla virkistämään jalkoja
- Televisiota katsellessa tai lukiessa

Älä seiso tai astu Cuben päälle

Cube on suunniteltu vain jalkarahina käytettäväksi.

Täyden painon asettaminen laitteen päälle voi vahingoittaa sitä.

Puhdista hellävaraisesti

Pyyhi pinta pehmeällä, kostealla liinalla. Vältä voimakkaita kemikaaleja tai laitteen kastelua.

Turvallisuus, vasta- aiheet & turvaohjeet

Värähtely toimii samalla alueella kuin kehon kudosten omat värähtelyt ja tämän vuoksi sivuoireiden mahdollisuus on vähäinen. Joillekin voi tulla sivuoireina huono- vointisuutta tai päänsärkyä, mutta tämä jää yleensä pois 1-2 käyttökerran jälkeen.

Välttääksesi huonovointisuutta ja päänsärkyä laitteen käytön jälkeen, suosittelemme juomaan reilusti vettä.

Laitteiden käytöllä ei ole ikärajoituksia.

Tärkeintä on, että ohjelman kokonaisvaikutus koetaan miellyttävänä.

Ohjelma on suunniteltu ainoastaan jalkojen ja alavartalon käyttöön.

Älä käytä laitteita, jos sinulla on jokin seuraavista:

- Akuutti tulehdustila, joka voi levitä
- Akuutti välilevyn pullistuma
- Flunssa tai kuume
- Silmän verkkokalvon tai mykiön irtoamisen vaara
- Akuutti veritulppa
- Akuutti syöpä
- Olet raskaana
- Rokotuspäivänä
- Sinulla on sisäisen verenvuodon vaara

Kysy lääkäriltäsi, mikäli olet epävarma laitteen soveltuvuudesta itsellesi.

Kun käytät sähkökäyttöistä laitetta, noudata aina perusvarotoimia.

Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.

Sähköiskun riskin vähentämiseksi irrota tämä laite aina sähköpistorasiasta heti käytön jälkeen ja ennen puhdistusta.

Liitä tämä laite vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.

Palovammojen, tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi:

1. Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa kytkettynä pistorasiaan. Irrota pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
2. Älä peitä erillistä elektroniikkayksikköä. Liiallinen kuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon
3. Lasten läsnäollessa noudatettava erityistä varovaisuutta.
4. Käytä laitetta vain tässä ohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseen.
5. Älä käytä tätä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai muu osa on vaurioitunut, pudonnut veteen tai se ei toimi kunnolla. Vie laite huoltoon tarkastettavaksi ja korjattavaksi. Älä kanna tätä laitetta virtajohdosta tai käytä johtoa kahvana.
6. Älä käytä lisäosia, joita valmistaja ei ole suositellut.
7. Vältä johdon asettamista kuuman pinnan läheisyyteen.
8. Älä koskaan käytä laitetta, jos elektroniikkayksikön ilmanottoaukot ovat tukossa. Pidä ilmanottoaukot vapaana nukasta, hiuksista ja vastaavista.
9. Älä koskaan työnnä elektroniikkayksikköön sinne kuulumattomia esineitä.
10. Älä käytä ulkona.
11. Älä käytä aerosolituotteita (suihkeita) tai happea laitteen läheisyydessä sen ollessa käytössä
12. Kun lopetat käytön irrota pistoke pistorasiasta.

Takuu

Oy Neurosonic Finland Ltd myöntää laitteelle kahdenkymmenen neljän (24) kuukauden takuun. Takuuaika lasketaan alkaneeksi siitä päivästä, jolloin laitteen ensimmäinen käyttäjä on saanut tuotteen haltuunsa. Tätä takuuta sovelletaan Suomen alueella, eikä sillä rajoiteta Suomessa voimassa olevan pakottavan lainsäädännön, kuten kuluttajansuojalain, soveltuvuutta laitteen kauppaan.

Jos tuotteessa on virhe, Oy Neurosonic Finland Ltd tai sen valtuuttama jälleenmyyjä korjaa viallisen laitteen tai luovuttaa käyttäjälle toisen laitteen harkintansa mukaan. Oy Neurosonic Finland Ltd ei vastaa virheistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Takuu tai muu Oy Neurosonic Finland Ltd:n virhevastuu ei koske laitteen normaalia kulumista eikä laitteen mukana tulevaa, ohjaukseen käytettyä tablettia.

Takuu ei myöskään koske tilanteita, jossa (I) virhe tai vika aiheutuu käyttäjästä, (II) laitetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, väärin tai huolimattomasti, (III) laite on liitetty toiseen laitteeseen, korjattu tai avattu tai muutoin muunneltu taikka asennettu virheellisesti, tai (IV) laite on muun kuin kuluttajan toimesta jälleenmyyty ilman, että Oy Neurosonic Finland ja laitteen alkuperäinen ostaja ovat nimenomaisesti sopineet tuotteen toimittamisesta jälleenmyyntitarkoituksessa.

Mikäli laitteen käyttäjä haluaa vedota Oy Neurosonic Finlandin myöntämään takuuseen, tulee käyttäjän esittää laitteen hankintakuitti, joka on lukukelpoinen. Käyttäjän tulee myös vedota takuuaikana laitteessa olevaan virheeseen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Käyttäjän tulee esittää takuuvaatimus takuuaikana.

Huolto

Älä huolla laitetta itse muutoin kuin tässä oppaassa on kerrottu. Jos tekninen huolto on tarpeen, ota yhteyttä Neurosoniciin: info@neurosonic.fi. Verkkosivuiltamme löytyvästä vianetsintäoppaasta löydät ohjeet yleisimpiin ongelmatilanteisiin.

Säilytä laitetta paikassa, jossa se ei altistu liialliselle pölylle. Pölyn kertyminen voi estää järjestelmän luotettavan toiminnan. Säilytä laitetta paikassa, jossa se ei altistu liialliselle pölylle. Pölyn kertyminen voi estää järjestelmän luotettavan toiminnan. Imuroi laitteen keskusyksikön tuuletuskanava 2-3 kertaa vuodessa. Näin varmistat, keskusyksikön toimivan jäähdytyksen.

Laitteen verhoilu puhdistetaan ulkoapäin tarvittaessa kostella liinalla ja miedolla pesuaineella. Kokeile aineen sopivuus ensin pienelle alueelle. Älä käytä puhdistamiseen syövyttäviä liuottimia. Varmista, ettei laitteeseen pääse vettä tai muita nesteitä. Sammuta virta irroittamalla laite pistorasiasta ennen huoltoa.

Tekniset tiedot Keskusyksikössä ulkopuolinen virtalähde, liitetään pistorasiaan. Jännite 15 V, teho: käytössä max 90 W, stand by-tilassa 0.5 W.

NEURÔSONIC

www.neurosonic.fi

[@neurosonicrelax](https://www.instagram.com/neurosonicrelax)

+358 10 201 1600

info@neurosonic.fi